

PHOENIX

PHOENIX A2

МАССАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Уважаемый покупатель!

Поздравляем с удачным приобретением! Вы приобрели современный массажер, который, надеемся, станет Вашим лучшим помощником. Он сочетает в себе передовые технологии и современный дизайн.

Надеемся, что данная модель удовлетворит все Ваши требования.

Прежде чем приступить к использованию массажера, внимательно изучите настоящее руководство и сохраните его для дальнейшего использования. В случае возникновения дополнительных вопросов обратитесь к специалисту, продавцу или дилеру, который проконсультирует Вас и поможет устранить возникшую проблему.

Обязательно сохраняйте инструкцию по эксплуатации.

Если у Вас возникли какие-либо вопросы по эксплуатации данного массажера, свяжитесь со службой технической поддержки или уполномоченным дилером, у которого Вы приобрели массажер.

Меры безопасности

Внимание!

Массажер предназначен для домашнего использования.

В целях обеспечения безопасности и надежной работы оборудования перед использованием массажера ознакомьтесь с инструкцией.

При использовании массажера следует соблюдать следующие базовые меры предосторожности:

- Используйте массажер только по назначению, описанному в данном руководстве. Во избежание получения травм используйте только те аксессуары, которые рекомендованы производителем;
- Массажер не предназначен для использования вне помещения;
- Во избежание воспламенения не пользуйтесь массажером в местах, где распыляются аэрозоли или осуществляется подача кислорода.

Меры предосторожности

Перед использованием оборудования необходимо внимательно прочитать инструкцию.

Не рекомендуется использовать высокую и среднюю скорость, а также сильно нажимать насадкой оборудования на зоны во время массажа. Лучше воздержаться от использования оборудования без медицинского разрешения, при:

- ношении кардиостимулятора;
- беременности;
- диабету;
- таких осложнений, как невропатия или повреждение сетчатки;
- недавней операции;
- эпилепсии;
- мигрени;
- грыжи межпозвонкового диска;
- ослаблении или спондилите;
- недавней трансплантации сустава;
- при использовании внутриматочных противозачаточных средств;
- при проблемах со здоровьем.

Люди со слабым здоровьем, а также дети должны использовать это устройство осторожно и в сопровождении здоровых взрослых. Эти противопоказания не означают, что нельзя использовать это устройство. Рекомендуется проконсультироваться с врачом и использовать его с разрешения врача.

В настоящее время проводятся исследования воздействия вибрационных упражнений на конкретные медицинские расстройства. Это, вероятно, приведет к сокращению списка противопоказаний, указанных выше. Практический опыт показал, что интеграция вибрационных упражнений в план лечения рекомендуется в ряде случаев (по рекомендации и в сопровождении с врачом, специалистом или физиотерапевтом).

Транспортировка/Хранение/Ввод в эксплуатацию

Транспортировка и эксплуатация массажера:

1. Массажер должен транспортироваться только в заводской упаковке;
2. Заводская упаковка не должна быть нарушена;
3. При транспортировке массажер должен быть надежно защищен от дождя, влаги, атмосферных осадков, механических перегрузок.

Хранение массажера:

Массажер рекомендуется хранить и использовать только в сухих отапливаемых помещениях со следующими значениями:

1. Температура: +10-+35С;
2. Влажность: 50-75%.

Если массажер хранился при низкой температуре или в условиях высокой влажности (имеет следы конденсации влаги), перед эксплуатацией его необходимо оставить в нормальных условиях на время не менее 2–4 часов. После данной процедуры и повторной проверки состояния, можно приступить к эксплуатации.

Настройка оборудования

Техническое обслуживание/ Гарантия/ Ремонт

Регулярное и своевременное техническое обслуживание продлевает срок службы изделия и сокращает количество обращений в сервисную службу. Для этого рекомендуем выполнять следующие процедуры.

Рекомендации по уходу

Обслуживание:

1. Слегка протереть поверхность оборудования влажным полотенцем, а после вытереть мягкой и сухой тканевой тряпкой;
2. При длительном хранении или путешествии, пожалуйста, отделите аккумулятор от оборудования и поместите его в оригинальную упаковочную коробку.

Предупреждение:

1. Не погружайте в воду, держите подальше от жидкостей и источников тепла, а также не допускайте попадания в отверстие системы охлаждения двигателя пыли и мусора;
2. Не удаляйте винты;
3. Выключите оборудование после одного часа использования и дайте массажеру остыть в течение получаса прежде чем снова его использовать;
4. Выньте зарядное устройство из аккумулятора после зарядки или перед использованием.

Оборудование не должно использоваться во время зарядки;

5. Запрещается использовать данное устройство на травмированной части тела запрещено без консультации с врачом.

Массажер предназначен для домашнего использования.

Не выбрасывайте гарантийный талон.

[illegible]

Указания по утилизации


ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Данный массажер не относится к бытовым отходам. Пожалуйста, не выбрасывайте оборудование либо элементы питания вместе с бытовыми отходами, для утилизации использованных элементов питания пользуйтесь действующими в Вашей стране системами возврата и сбора для утилизации.

Надлежащий раздельный сбор разобранных приборов, которые впоследствии отправятся на переработку, утилизацию или экологичное захоронение, способствует предотвращению возможных негативных воздействий на окружающую среду и здоровье человека, а также позволяет повторно использовать материалы, из которых изготовлено устройство. За незаконную утилизацию устройства пользователь может быть привлечен к административной ответственности, предусмотренной действующим законодательством.



Оборудование

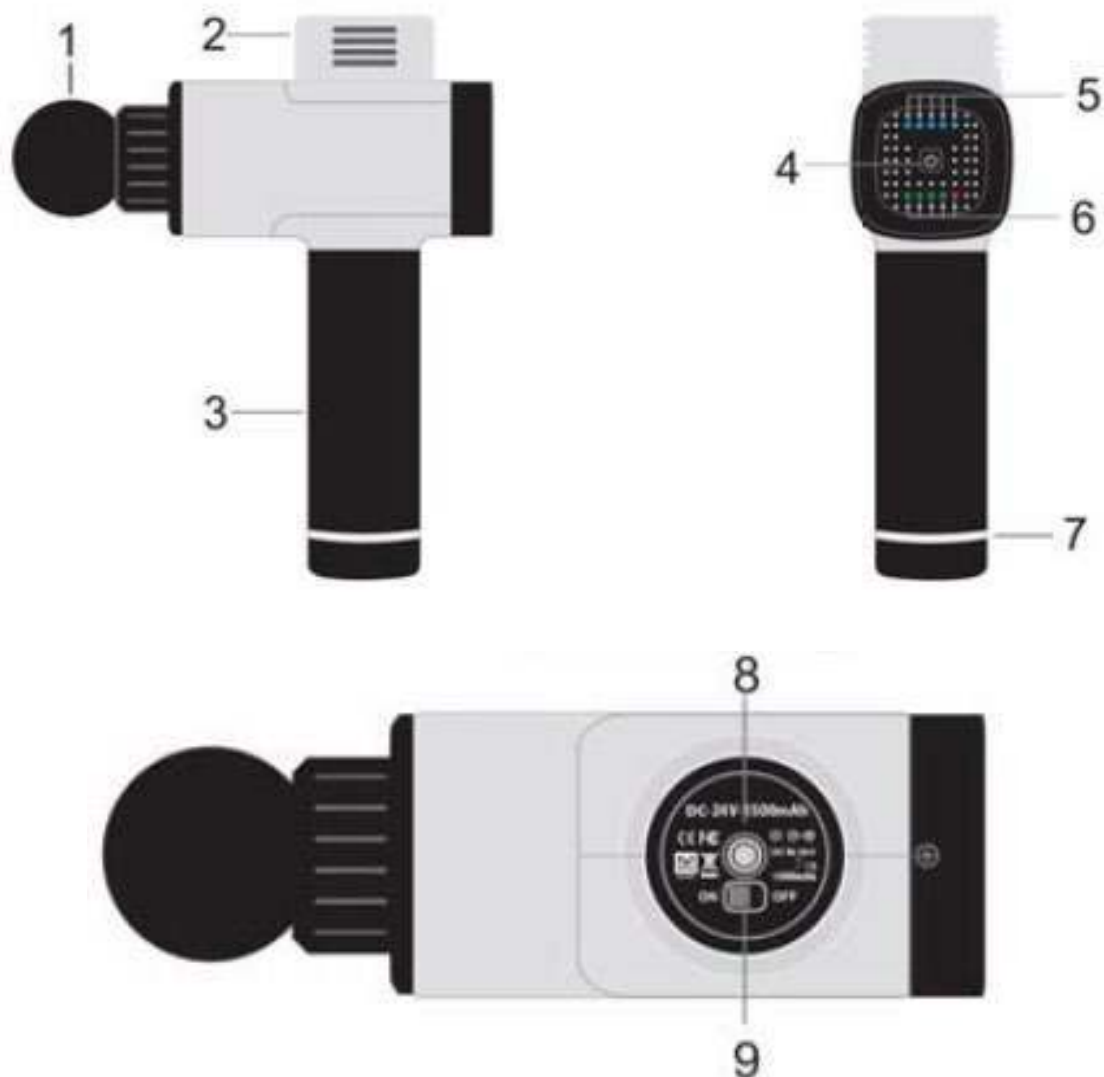

1. Насадка для массажа;
2. Высокочастотный, тихий, надежный двигатель;
3. Батарея (напряжение: 24 В, объем: 1 А)
4. Кнопка запуска двигателя и регулировки скорости;
5. LED-индикатор скорости (синий);
6. Уровень заряда батареи (зеленый, красный);
7. Кнопка PUSH для отсоединения аккумулятора;
8. Порт зарядки;
9. Кнопка включения/выключения.

Формы массажных головок



Использование массажера:

1. Установите батарею 3 для массажного пистолета, крепление на батарее в правильном положении к кнопке батареи 2 и нажмите до конца;
2. Кнопку батареи 6 поверните в положение «ВКЛ.», четыре зеленых и один красный индикаторы справа налево показывают количество заряда, когда остался только красный индикатор необходимо произвести зарядку аккумулятора;
3. Исходя из области тела, которой необходим массаж, выберите массажную головку и установите ее в круглое отверстие массажного пистолета; нажмите кнопку 4 (запуск двигателя). Первый синий LED-индикатор показывает режим низкой скорости; при нажатии кнопки запуска двигателя – происходит переключение на режим средней скорости; при следующем (третьем) нажатии на кнопку запуска двигателя, происходит переключение на режим высокой скорости; нажимая кнопку запуска двигателя в четвертый раз, происходит выключение двигателя. Нажимая кнопку запуска двигателя в пятый раз, снова происходит включение режима низкой скорости. Повторение данной процедуры происходит последовательно и перейти с режима низкой скорости сразу на высокую скорость – нельзя;
4. После массажа выключите аккумулятор при помощи кнопки ON/OFF, расположенном внизу аккумулятора. При необходимости выньте батарею, нажмите кнопку PUSH 2 и отсоедините, чтобы извлечь аккумулятор.

Использование батареи:

После того, как батарея разрядилась, ее необходимо зарядить. Потребуется порядка 6 часов, чтобы полностью зарядить аккумулятор, а затем Вы снова сможете использовать массажер. Можно заряжать как в подключенном состоянии, так и отдельно. Для зарядки подключите штекер прилагаемого 24-вольтового адаптера к зарядному порту аккумулятора и вставьте адаптер в настенную розетку. Светодиодная полоса на индикаторе аккумулятора пульсирует, показывая уровень заряда аккумулятора и активную зарядку.

Когда батарея подключена, на устройстве мигает индикатор, показывая уровень заряда батареи и

активную зарядку. Полная зарядка отображается, когда все светодиодные индикаторы перестают мигать и остаются полностью освещенными. Батарея может заряжаться в любое время и при любом уровне заряда батареи.

Не рекомендуется полностью разряжать аккумулятор до уровня красного светодиода. Среднее время работы составляет более двух часов в зависимости от уровня скорости и давления, приложенного во время использования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Емкость аккумулятора	1500 мАч
Кол-во режимов	3
Масса нетто	1,5 кг

Поставщик: ООО «Фитатлон», 115230, г. Москва, Каширское шоссе, д. 13Б, эт. 5, пом. 1, ком. 31.

Дата изготовления указана на упаковке массажера.

*Упаковка содержит информацию о дате изготовления оборудования, указанную в виде шифра.

Пример: С180122, где 18 – год изготовления, 01 –месяц изготовления, 22 – внутренний номер учета.

Оборудование сертифицировано в соответствии с Техническим Регламентом Таможенного Союза.

*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию массажера, не ухудшающие значительно его основные технические характеристики.

Все актуальные изменения в конструкции либо технических спецификациях изделия отражены на официальном сайте поставщика оборудования ООО «Фитатлон»: neotren.ru.

Последнюю версию Руководства пользователя Вы можете найти на сайте: neotren.ru.

ВНИМАНИЕ!

МАССАЖЕР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.



